

عينة جرثومة المعدة (هليكوباكتر) من البراز (HepyNhO)


يمكنك الحصول على لوازم العينة من مركز HUS



- إن الاسهال في البراز غير صالح للعينة.
- لا يمكن استخدام بعض الادوية قبل اخذ العينة. الرجاء الاطلاع على الفقرة الخاصة بالادوية الممنوعة.
- ملاحظة: احتفظ بانبوب العينة بعيداً عن تناول الاطفال. يحتوي الانبوب على Guandine thiocyanate الرجاء الاطلاع على فقرة التوجيهات.

اخذ عينة البراز

1. ضع عينة البراز مثلاً في صحن كرتون (صالح للاستعمال مرة واحدة).
2. افتح سدادة الانبوب الزرقاء الفاتحة وضع الانبوب في وضع عمودية على مكان مسطح.
3. افتح الغلاف وامسك بالعودة
4. ضع رأس العودة في البراز. لا تضع الكثير من البراز على رأس العودة. إن القليل منه كافٍ.

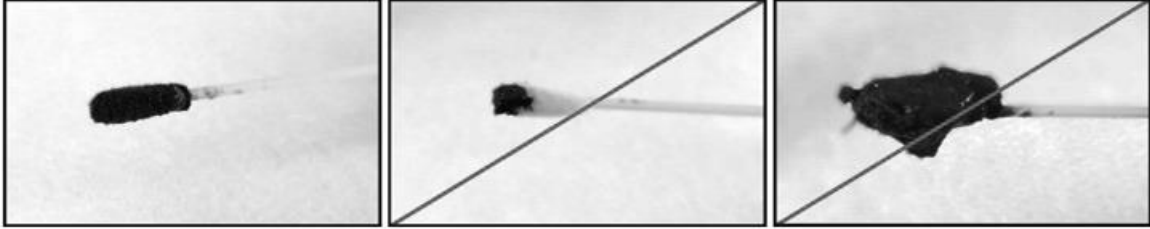

كمية كافية من البراز

كمية غير كافية من البراز

كمية كئيبية من البراز

5. ضع العودة في سائل الانبوب واخلط جيداً.
6. اخرج العودة من السائل وارمها في النفايات.
7. اغلق الانبوب بالسدادة الزرقاء بعناية.
8. اكتب اسمك على اللاصقة، الرقم التعريفي، تاريخ ووقت اخذ العينة.
9. ضع الانبوب ذات السدادة الزرقاء في كيس بلاستيك. اغلق الكيس بعناية.
10. من المفضل احضار الانبوب الى المختبر في نفس اليوم. اذا لم تستطع احضاره في نفس اليوم، احتفظ به في البراد حتى اليوم التالي.

الادوية الممنوعة

الادوية التي لا يمكن استخدامها قبل اسبوعين من اخذ العينة:

- المواد المانعة لمضخة البروتون (proton pump inhibitor): مثلاً Losec®, Omeprazol®, Meprazol®, Omestad®, Pantopratsoli®, Pantoprazol®, Pantoprazole®, Somac®, Gasterix®, Lanrec®, Lansoprazol®, Lansoprozole®, Lantil®, Lanvone®, Lanzo melt®, Zolt®, Pariet®, Rabeprazol®, Acidial®, Esomeprazol®, Nexium®

الادوية التي لا يمكن استخدامها قبل اربعة اسابيع من اخذ العينة:

- ادوية للتخلص من جرثومة المعدة (هليكوباكتر): مثلاً Helipak A®, Helipak K®
- الادوية المضادة للحبيويات

التوجيهات في حال ملامسة سائل الانبوب ل:

الجلد:

- اخلع الثياب الملوثة.
- اغسل الجلد تحت الماء المتدفق وبمادة منظفة لمدة 10-15 دقيقة.

العيون:

- اغسل عيونك تحت الماء المتدفق لمدة 20-30 دقيقة.
- اذا تطور الامر وظهرت عوارض الالتهاب في العيون، كالالام او خلل في النظر، اتصل بالطبيب.

الفم:

- لا تحاول التقيؤ.
- اغسل فمك.
- اشرب الماء (حوالي كوب).

عند الحاجة اتصل بمركز تعليمات التسمم. هاتف 09 471 977 او 09 4711

لمعلومات اضافية

اذا كان لديك اي اسئلة، يمكنك الاتصال بهاتف خدمات HUS على الرقم 09 471 86800 من الاثنين الى الجمعة 7.30 - 15.30. للأسف لا يمكن لهاتف الخدمات اعطاؤك النتائج المخبرية.