

Avföringsprover för F-BaktVIP- och F-BaktVi3-undersökningar

För undersökningen får du:

- Två olika provrör
- Engångsbehållare
- Namnetiketter

Ordna provtagningen, om det är möjligt, så att du kan lämna provet till laboratoriet under samma dag.


Ta en del av avföringen i exempelvis en engångsbehållare. Ta provet i två olika provrör enligt anvisningarna nedan.

Prov i rör som innehåller vätska (blå kork)



1. Ta av korken på provröret och ställ röret upprätt på ett jämnt underlag. Det finns vätska i röret. Akta så att du inte spiller vätska ur röret.

2. Stick in provstickans ände i avföringen och ta **en liten mängd** avföring på stickan. Ta inte för mycket avföring på stickan, endast ett tunt lager.

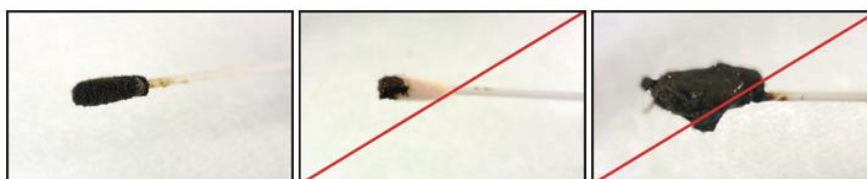

Lagom mängd

För lite

För mycket

Bild: Mobidiag

3. Sätt stickan i vätskan i röret och blanda noggrant så att provet löser sig i vätskan. **Lämna inte stickan i röret**, utan hela stickan kasseras med blandavfall. Skruva fast korken ordentligt. Lösningen i röret ska vara ljus i färgen som kaffe med mjölk efter tillsats av avföring.

FARA! Provröret med blå kork innehåller guanidintiocyanat. Förvaras utom räckhåll för barn! Se instruktioner på baksidan.

Prov i rör med gel (rött lock)

- 1.** Ta bort den vita korken på röret och kasta den i soporna.
- 2.** Rulla bomullsdelen på provtagningspinnen i avföringen, särskilt i eventuellt slemmiga eller blodiga områden.
- 3.** För in pinnen i röret så att bomullsdelen kommer in i gelen och korken sluter tätt. Bryt inte stickan.



Avföringsprover för F-BaktVIP- och F-BaktVig-undersökningar

Skriv på etiketterna:

- Namn
- Personbeteckning
- Datum och klockslag

Klistra en egen etikett på båda rören.

Lägg proverna i en plastpåse (se bild) och lämna dem i laboratoriet.

Om du inte kan lämna proverna samma dag, förvara dem i kylskåpet över natten.



Mer information

Om du har frågor kan du ringa till HUSLABs servicenummer tfn 09 471 86800, måndag–fredag kl. 7.30–15.30. Laboratorieresultat kan tyvärr inte lämnas ut på servicenumret.

Instruktioner om vätskan i provtagningsburken hamnar

PÅ HUDEN:

- Ta av kläder som vätskan möjligen har stänkt på.
- Tvätta huden med rikligt med vatten och mild tvättlösning i ca 10–15 minuter.

I ÖGONEN:

- Skölj med rikligt med vatten i ca 20–30 minuter.
- Om inflammationssymptom bildas i ögonen, såsom smärta eller synstörningar, ta kontakt med läkare.

I MUNNEN:

- - försök inte framkalla kräkningar.
- - skölj munnen.
- - drick vatten (ca 1 glas).

Ta vid behov kontakt med Giftinformationscentralen tfn 09 471 977 eller 09 4711. Numret betjänar 24h/7.